


Informação útil sobre o Comunicador LATITUDE

Para que é utilizado?

O Comunicador LATITUDE foi concebido para recolher informações do seu dispositivo implantado. Em seguida, o seu Comunicador envia estes dados para o Website do Médico, para serem acedidos pela equipa prestadora de cuidados de saúde e assim apoiá-la na gestão dos seus cuidados continuados.

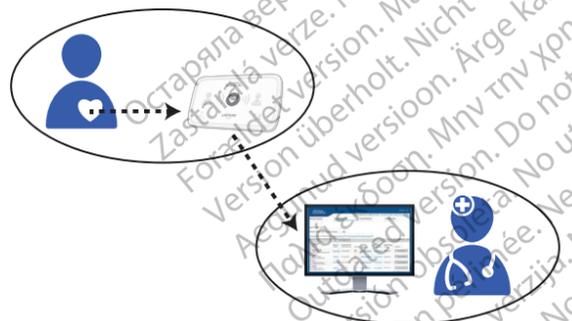

⚠ Não é um sistema de emergência médica.

Como funciona?

Assim que o Comunicador estiver configurado (*vire para consultar os passos de configuração*), irá verificar periodicamente o seu dispositivo de acordo com um agendamento definido pelo seu centro. Por vezes, esta ação irá ocorrer automaticamente e, outras vezes, o Comunicador poderá requerer a sua intervenção. Basta premir o Botão do Coração, quando este estiver a piscar, para concluir a verificação do dispositivo.



Onde colocar o seu Comunicador?

- A uma distância de 3 metros da sua cabeceira ou do local onde dorme. Se isto não for possível, coloque o seu Comunicador num local onde passe uma parte considerável do seu dia.
- A, pelo menos, 30 cm de distância de televisores, leitores de DVD, computadores pessoais, modems, routers, microondas e outros equipamentos eletrónicos.
- Onde possa sentar-se confortavelmente e ver a parte frontal do Comunicador.
- Dependendo do método de ligação utilizado:
 - **Telemóvel:** Num local onde obtenha um bom sinal de telemóvel.
 - **Internet:** Próximo, mas a distância em relação ao modem ou router de Internet tem de ser sempre superior a 1 m.

O que é que estas luzes significam?

Se vir ...	Significa que ...	Faça o seguinte ...
 Botão do Coração intermitente	O Comunicador precisa de ajuda para concluir uma verificação agendada para o dispositivo. <i>Nota: Isto não significa que o seu dispositivo implantado tem um problema.</i>	Prima o botão do Coração. Mantenha-se junto do Comunicador até que todas as luzes estejam conforme ilustrado na fila seguinte.
	Os dados do seu dispositivo implantado foram enviados para o Website do Médico.	Não é necessária qualquer ação.
	Foi detetado um potencial problema que necessita de ser verificado pelo seu prestador de cuidados de saúde.	Contacte o seu prestador de cuidados de saúde.
 OU 	Qualquer Onda Amarela ou o ícone Ligar ao Médico de cor amarela significa que o seu Comunicador está a ter dificuldade em estabelecer ligação ou não está a funcionar devidamente.	Consulte o erro aplicável na secção Resolução de problemas do seu Manual do paciente.

Vire para consultar os passos de configuração.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Internacional: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-008 pt Europe 2020-04

CE 2797



GUIA DE QUICK START


Comunicador LATITUDE™



Leia antes de instalar.


1 Confirme as definições dos comutadores.

OBSERVAÇÃO: Este Guia de Quick Start contém instruções de definição de comutador e configuração apenas para ligações móveis ou de Internet. Se está a utilizar uma ligação de telefone comum, consulte o Manual do paciente para obter essas informações.

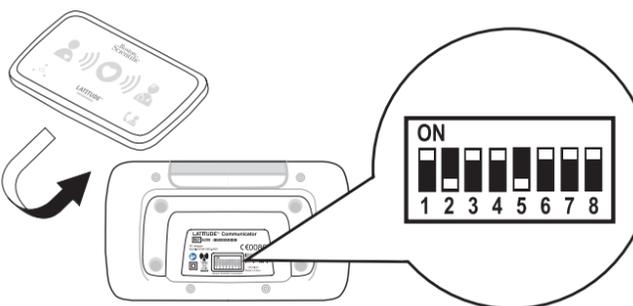

Verifique os comutadores brancos numerados de 1 a 8 na parte inferior do seu Comunicador. Se corresponderem às definições dos comutadores apresentadas acima, não é necessária qualquer ação. Se não corresponderem, faça-os deslizar para cima ou para baixo para os configurar de acordo com a imagem.

2 Ligue a fonte de alimentação.

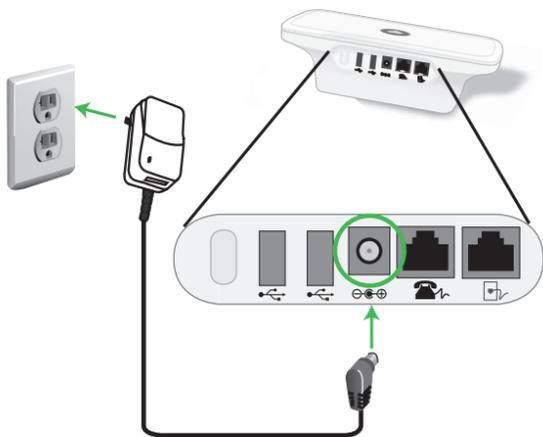

3 Identifique qual o método de ligação que vai utilizar para se ligar ao Website do Médico:


- A. Móvel **ou**
- B. Internet

Em seguida, ligue os cabos correspondentes ao **método** escolhido, conforme ilustrado.


Consulte o Manual do paciente para obter mais informações.

4 Ligue os cabos de acordo com o método de ligação **escolhido** (A ou B).

A. Ligação móvel, usando um adaptador móvel USB

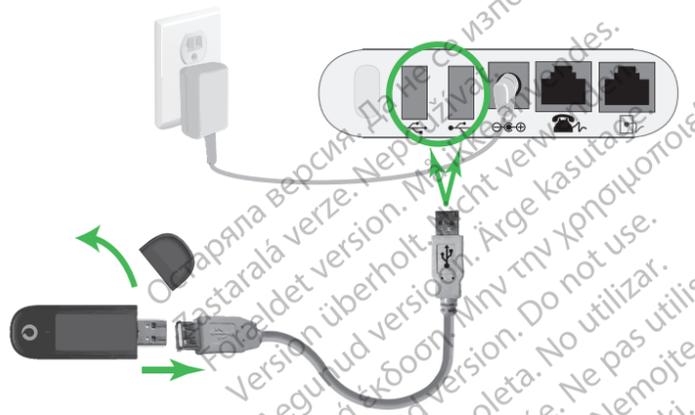

ou B. Ligação à Internet, usando um adaptador Ethernet USB

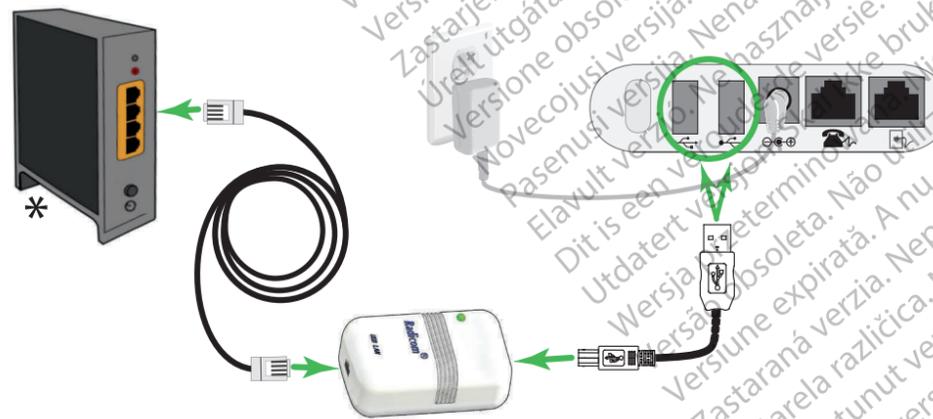

* Router ou modem de Internet

Mantenha o seu dispositivo de ligação sempre conectado ao Comunicador.

Desta forma, o Comunicador pode enviar os dados recolhidos do seu dispositivo implantado para o Website do Médico, para serem acedidos pelo seu prestador de cuidados de saúde.

5 Prima o Botão do Coração intermitente no Comunicador LATITUDE para iniciar o processo de configuração.



6 Aguarde enquanto os dados são enviados. Este processo pode demorar alguns minutos.

   Recolher dados do dispositivo implantado

   Envio de dados

Se o botão do Coração piscar novamente, volte a premi-lo.

7 Aguarde atualização do software



Pode estar em curso uma atualização do software. Aguarde vários minutos até que o Botão do Coração pisque, depois prima-o de novo. Isto pode acontecer várias vezes. Prima o Botão do Coração sempre que este pisca.

8 Sucesso!



Se os indicadores acenderem conforme mostrado acima, a configuração está concluída! As luzes apagam-se automaticamente após 2 minutos.

9 Mantenha o Comunicador sempre ligado à tomada.



Isto permite ao Comunicador verificar o seu dispositivo implantado quando tal for agendado pelo seu prestador de cuidados de saúde.

? Precisa de mais ajuda?

Se vir alguma onda amarela ou o ícone Ligar ao Médico de cor amarela (conforme mostrado no outro lado deste Manual), consulte o erro aplicável na secção Resolução de problemas do seu Manual do paciente.

Para obter mais assistência, contacte o seu prestador de cuidados de saúde ou telefone para o Suporte LATITUDE através do número indicado para o seu país no Manual do paciente.

Vire para consultar informação útil.

