

Advanix™ Pancreatic Stent

アドバニクス 膵管用ステント

アドバニクス 膵管用ステント (ビッグテイル)

ステント長 (cm)	フラップなし		フラップあり	
	ステント径			
	4F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	7F (カタログ番号)
4	-	-	-	3723
5	-	-	-	3724
7	-	-	3715	3726
9	3693	3705	3717	3728
11	3695	3707	3719	3730
13	3697	3709	3721	3732
15	-	-	-	3733
対応デリバリー (カタログ番号)	NaviFlex™ Pancreatic Pusher 3503	NaviFlex™ Pancreatic Pusher 3503	NaviFlex™ Pancreatic Pusher 3503	NaviFlex™ RX Pancreatic Delivery System (7F) 3506

アドバニクス 膵管用ステント (ストレート)

ステント長 (cm)	片側フラップ		両側フラップ		
	ステント径				
	4F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	7F (カタログ番号)	10F (カタログ番号)
4	-	-	-	3649	3662
5	-	-	-	3650	3663
7	-	-	3641	3652	3665
9	3619	3631	3643	3654	3667
11	3621	3633	3645	3656	3669
13	3623	3635	3647	3658	3671
15	-	-	-	3659	3672
対応デリバリー (カタログ番号)	NaviFlex™ Pancreatic Pusher 3503	NaviFlex™ Pancreatic Pusher 3503	NaviFlex™ Pancreatic Pusher 3503	NaviFlex™ RX Pancreatic Delivery System (7F) 3506	NaviFlex™ RX Pancreatic Delivery System (10F) 3508

アドバニクス 膵管用ステント (キット)

ステント長 (cm)	ビッグテイル			ストレート		
	フラップなし	フラップあり	片側フラップ	両側フラップ		
	ステント径					
	4F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	4F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)	5F (カタログ番号)
3	3735*	3739*	3743*	3746*	3750*	3754*
4	3736	3740	3744	3747	3751	3755
5	3737	3741	3745	3748	3752	3756
7	3738	3742	-	3749	3753	-

* 手元側のエクス線不透過性マーカのみ (ポジショニングマーカなし)
【キット内容】アドバニクス膵管用ステント、NaviFlex™ RX 膵管用ステントプッシャー

プッシャー / デリバリー

3503	NaviFlex™ Pancreatic Pusher (4F / 5Fステント用)
3506	NaviFlex™ RX Pancreatic Delivery System (7Fステント用)
3508	NaviFlex™ RX Pancreatic Delivery System (10Fステント用)

適合ガイドワイヤ：0.035インチ
適合鉗子口径：ステント径7F以下は3.2mm、10Fは4.2mm

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：膵管用プラスチックステントシステム
医療機器承認番号：22700BZX00047000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1908-31228-B-ODP/PSST20190805-0751

Boston Scientific
Advancing science for life™

Advanix™ Pancreatic Stent

アドバニクス 膵管用ステント



Advanix™ Pancreatic Stent

アドバニクス 膵管用ステント

柔軟性に優れた膵管用ステントAdvanix™は
膵管ステントに求められる
良好なコンフォーマビリティを提供します

SMOOTH & FLEXIBLE

膵管の走行に滑らかに追従する
高いコンフォーマビリティを発揮

- 異なる2つの素材をバランスよく配合し、スムーズなステント挿入をサポートする適度なコシと、膵管走行に滑らかに追従する柔軟性を両立させました。


DRAINAGE

良好なドレナージとステント開存を実現するステントデザイン


- ステントの内腔を最大限に広く保つ肉薄構造により、さらにドレナージ効果を高めます。
- サイドホールは5mm刻みで90°の角度にらせん状に設置。分枝膵管からの膵液を効率よくドレナージするとともに、ステントの強度を保ち、耐久性を高めました。



膵液を効率よくドレナージする
広い内腔

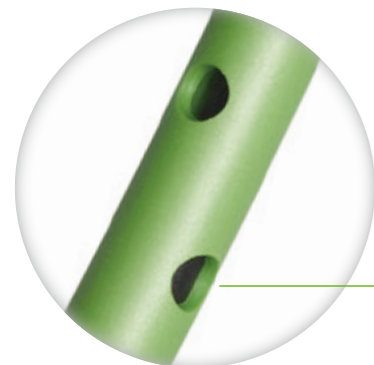

サイドホール

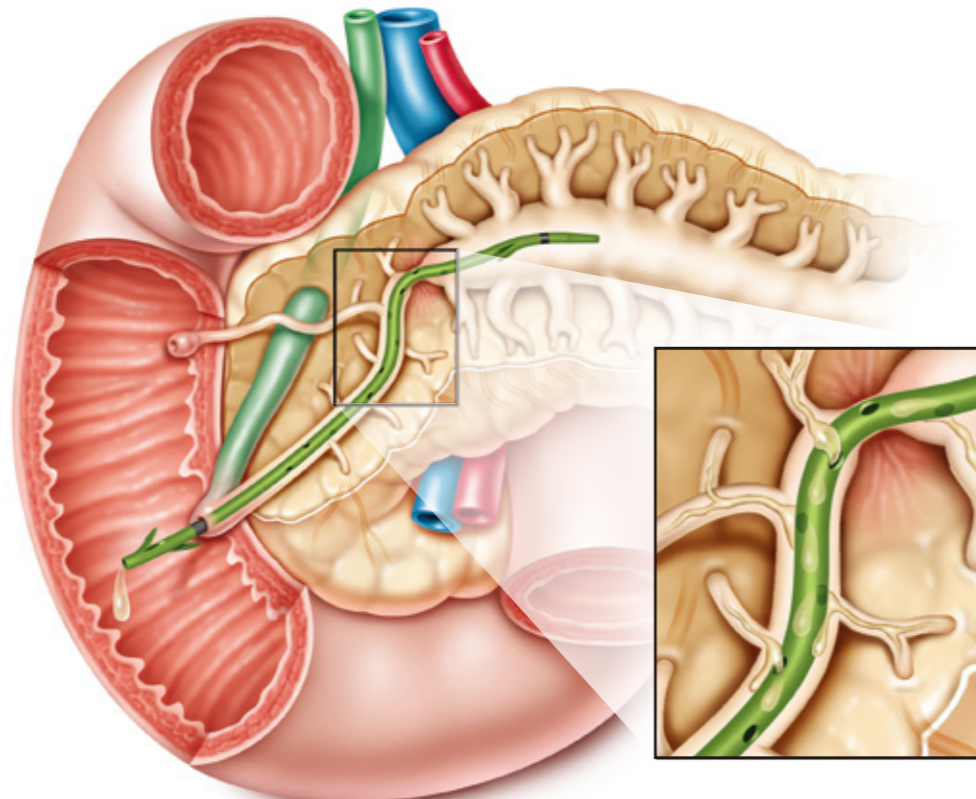


ENHANCED VISUALIZATION

正確なステント留置をサポートする2つのマーカ*

- ステントの先端（ディスタル）側にエックス線不透過性マーカを、手元（プロキシマル）側にポジショニングマーカをそれぞれ装着しています。留置中・留置後のステントの位置が明確になり、より正確で安全なステント留置をサポートします。

* 3cm長のステントは手元側のエックス線不透過性マーカのみ

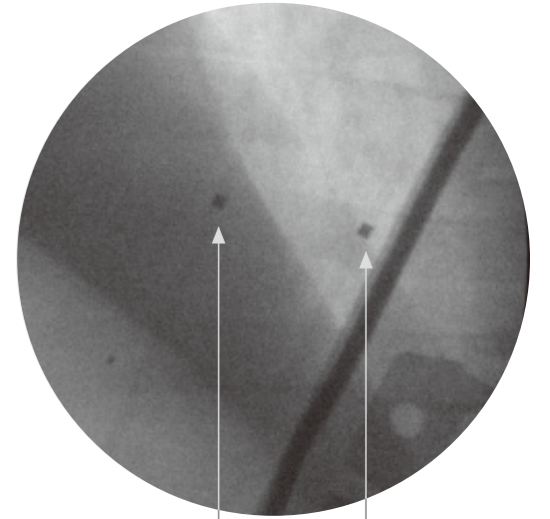

Advanix Pancreatic Stent
4F (1.35mm)

VARIETY OF CHOICE

症例に応じて使い分けられる豊富なラインナップ

- ステント形状、ステント径、ステント長、フラップの有無に応じて、豊富なラインナップから症例ニーズに合ったステントを選択いただけます。
- 7F/10Fのステントには、挿入性に優れた専用のステントデリバリーをご用意。便利なキットタイプもご利用いただけます。

NaviFlex™ RX
Pancreatic Pusher
4F/5Fステント用 (キットのみ)



NaviFlex™
Pancreatic Pusher
4F/5Fステント用



NaviFlex™ RX
Pancreatic Delivery System
7F/10Fステント用

