

EASY TIE™

カタログ番号	穿刺針長 (mm)	穿刺針外径 (mm/G)	梱包単位
2018	100	1.48/17	1セット(3点固定用)／箱

販売名：イージータイ
医療機器承認番号：22000BZX00370000

EASY TIE™

イージータイ 胃瘻造設用胃壁固定具



EASY TIE™ イージータイ

胃瘻造設のPull/Push法に胃壁・腹壁固定の安心をプラスしました

簡単・クイック操作

穿刺からスーチャ留置まで片手で操作できるため、簡便でスピーディな手技をサポートします。



優れた穿刺性能

先端カットを鋭角に設計しており、伸びやすい胃壁もスムーズに穿刺が行えます。

T字アンカーを穿刺針内に装着

T字アンカーは穿刺時に針の中に装着されているため、優れた穿刺性能を確保し留置が簡便です。




手技時間の短縮

パッケージから取り出してすぐに使用できるため、術前のセットアップが省け手技時間を短縮できます。



調節可能な体表クリップ

クリップはワンタッチで調節が可能。一度固定した後も、スーチャの締め付け具合を何度でも調節できます。

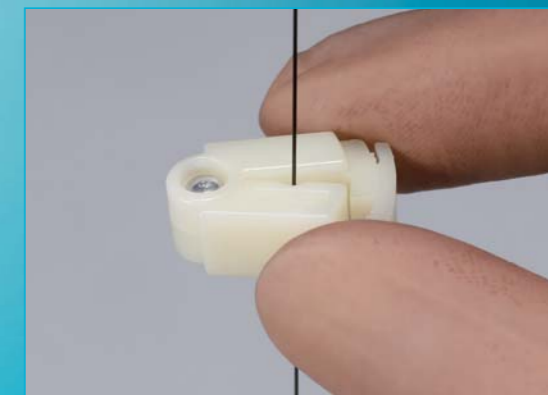

皮膚にやさしいセルローススポンジをセット化

皮膚に接触する部分にはセルローススポンジをセットしているため、出血や滲出液などを吸収し、皮膚を清潔に保ちます。

信頼のステンレス製T字アンカー

アンカー部分には医療現場で幅広く使用されている、信頼の“SUS304”を採用。生体適合性に優れ、安心してお使いいただけます。