


**Boston
Scientific**

Advancing science for life™



HANAROSTENT® Biliary Multi-hole NEO

マルチホールカバー NEO

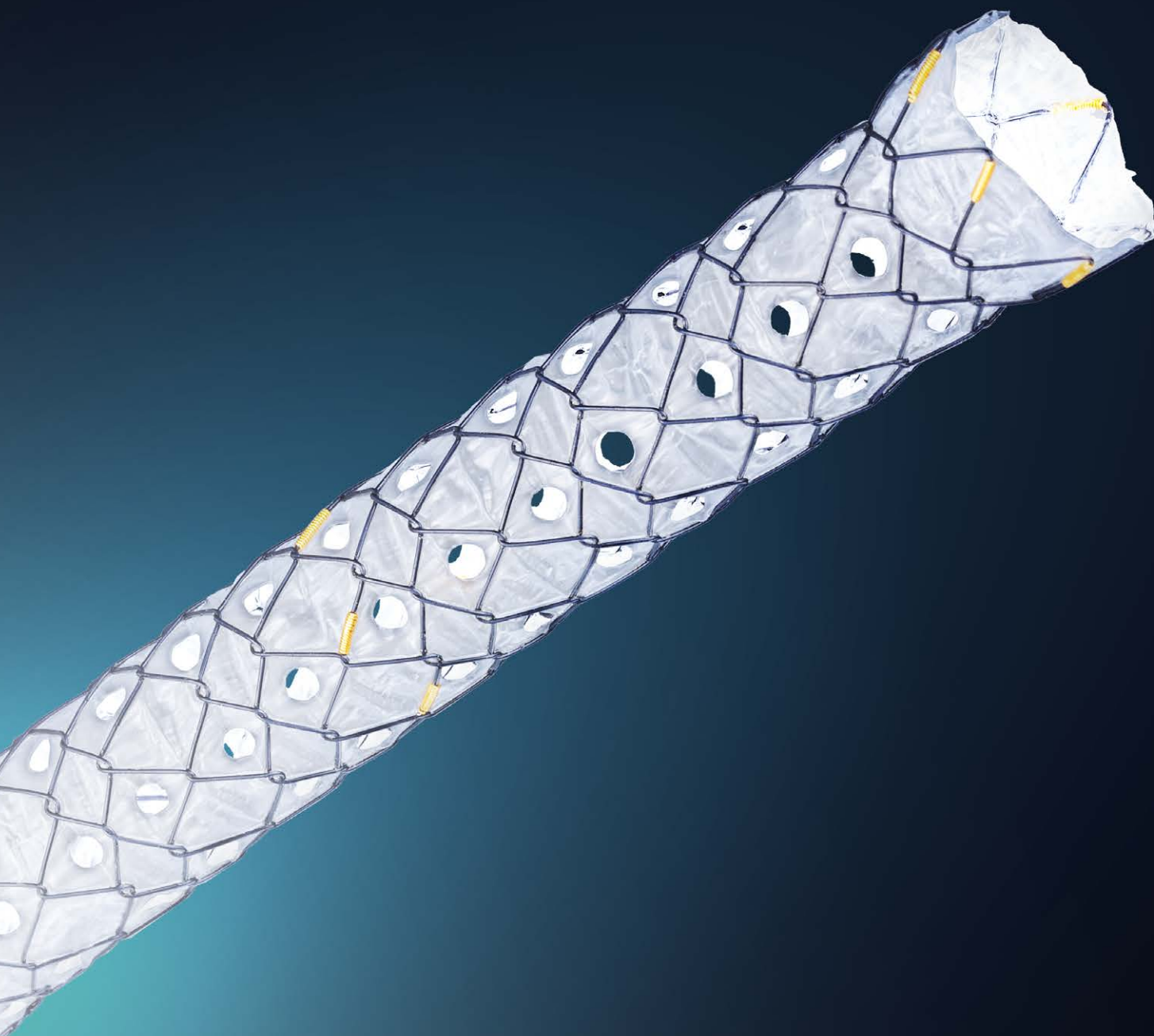




HANAROSTENT® Biliary Multi-hole NEO


マルチホールカバー NEO

従来のHANAROSTENT®フルカバー NEOの
シリコンカバーにホール配列が施された
マルチホールカバーステント

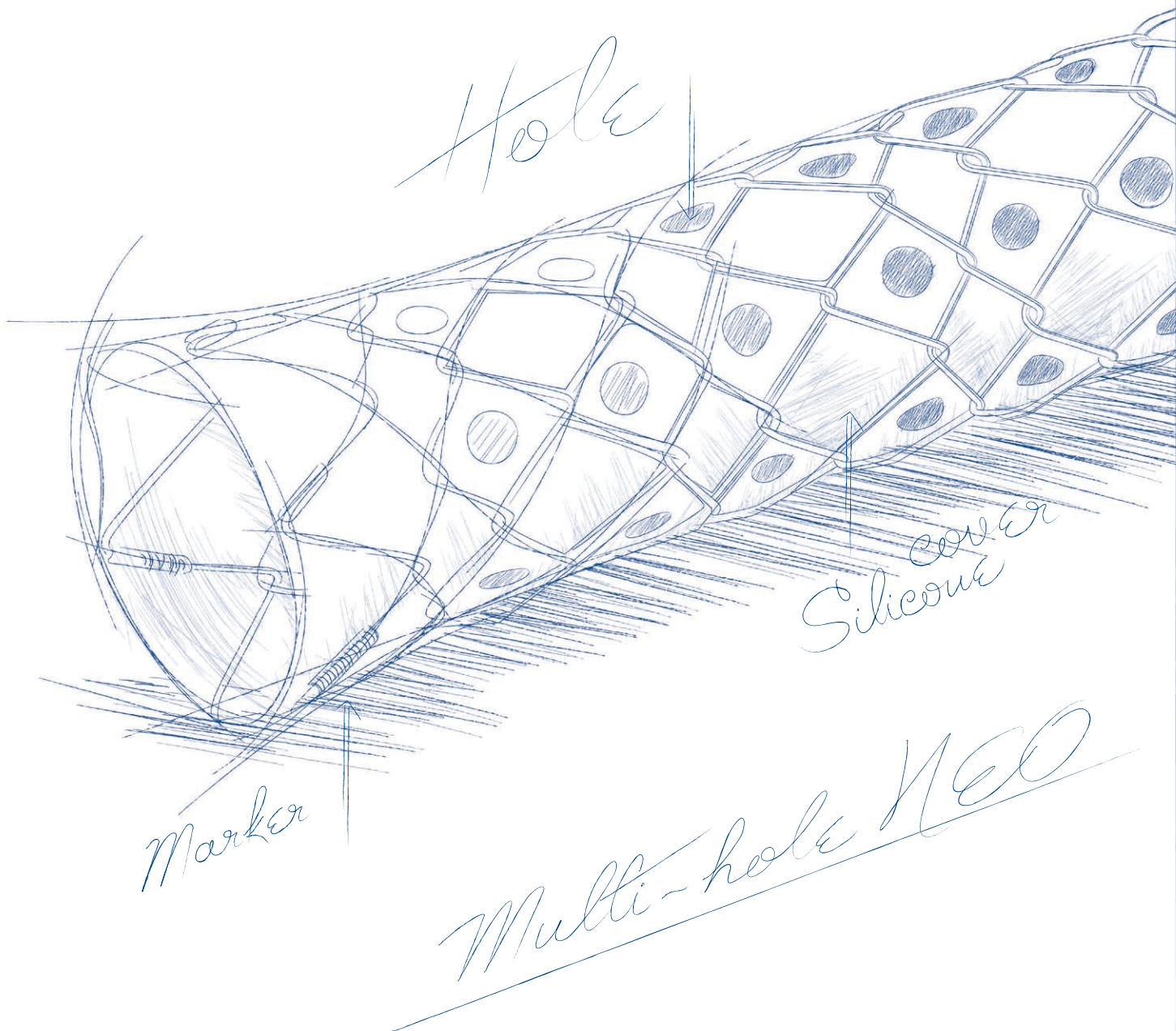


意図した位置へ正確に留置するために

狭小部の突破性能を持ちつつ、
内視鏡のワーキングチャンネル内も
スムーズに通過するように
外径8Fのデリバリーシステムを採用しました。
再収納機能は正確な位置合わせに寄与し、
治療戦略に沿った手技進行をサポートします。

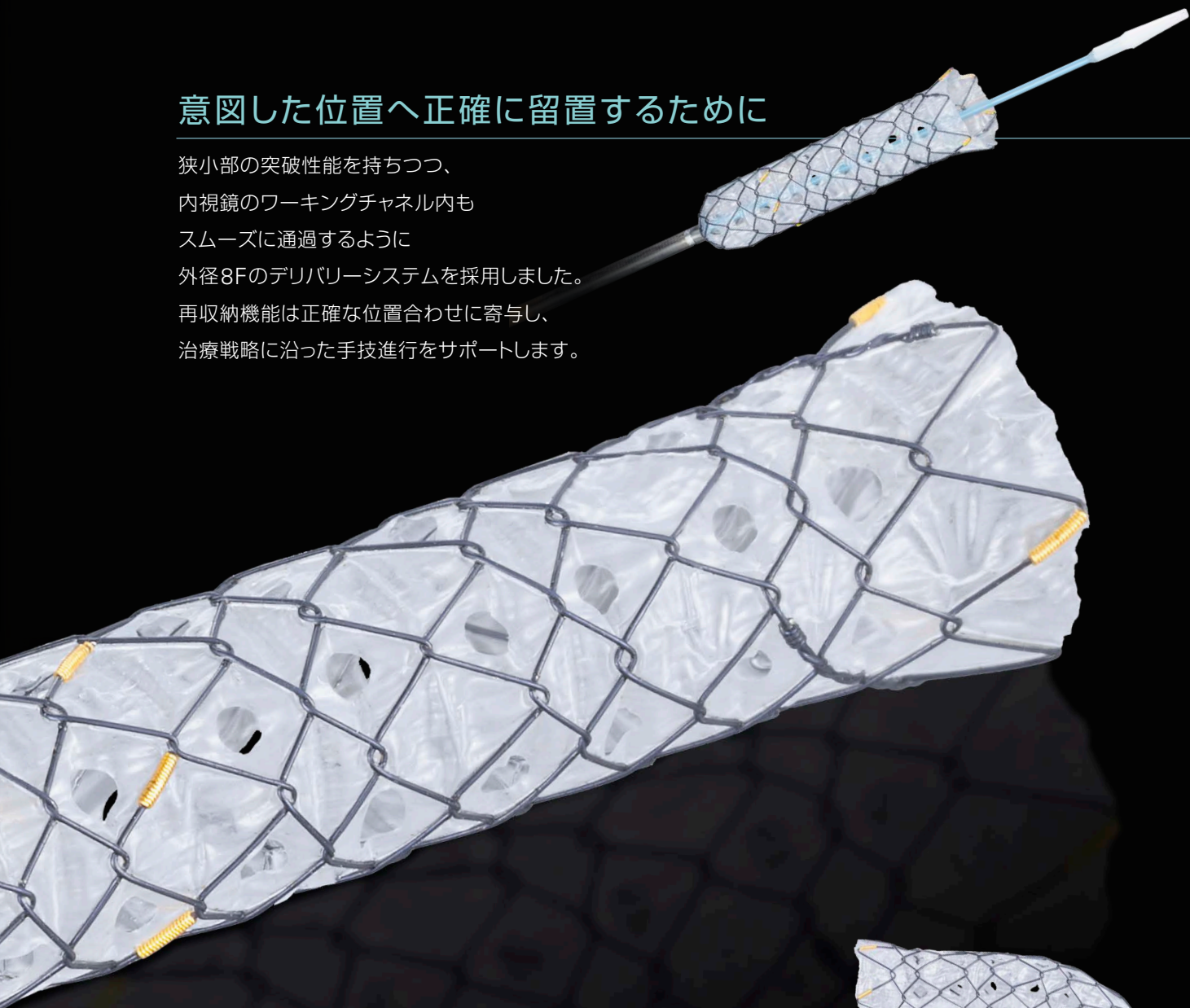


留置後のドレナージ効果の継続を目指して

ステントフック部の可動性を高めたデザインを採用することで
滑らかな内腔面が保持できることを期待しており、
カバー部分に開口部を設けたマルチホールにより胆汁の停滞を避けることを期待しています。
これらの特徴により留置後のドレナージ効果の継続を目指しています。

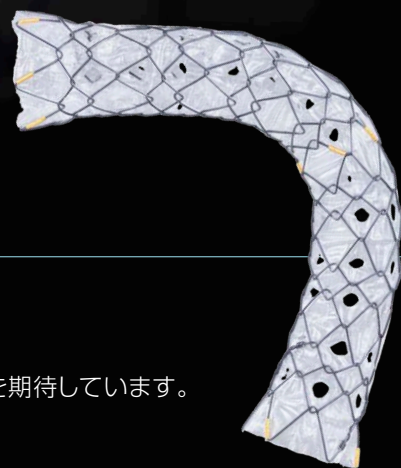

速やかなドレナージを確保するために


2つの異なるセルサイズを組み合わせることで
適度な拡張力とショートニングの抑制を期待しています。
速やかなドレナージにより次の治療段階への移行をサポートします。

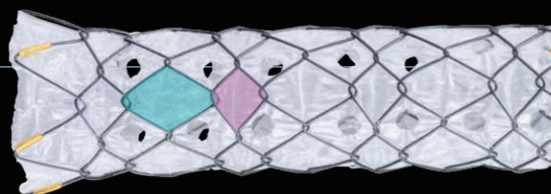

ハナロステント 胆管用ステント マルチホールカバーNEO (Endoscopic use)

カタログ番号	ステント		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径 (mm)	ステント長 (mm)	外径 (F)	有効長 (cm)	
M00504110	8	50	8	180	0.035
M00504120	8	60	8	180	0.035
M00504130	8	70	8	180	0.035
M00504140	8	80	8	180	0.035
M00504160	8	100	8	180	0.035
M00504180	10	50	8	180	0.035
M00504190	10	60	8	180	0.035
M00504200	10	70	8	180	0.035
M00504210	10	80	8	180	0.035
M00504230	10	100	8	180	0.035

販売単位 1本 / 箱入

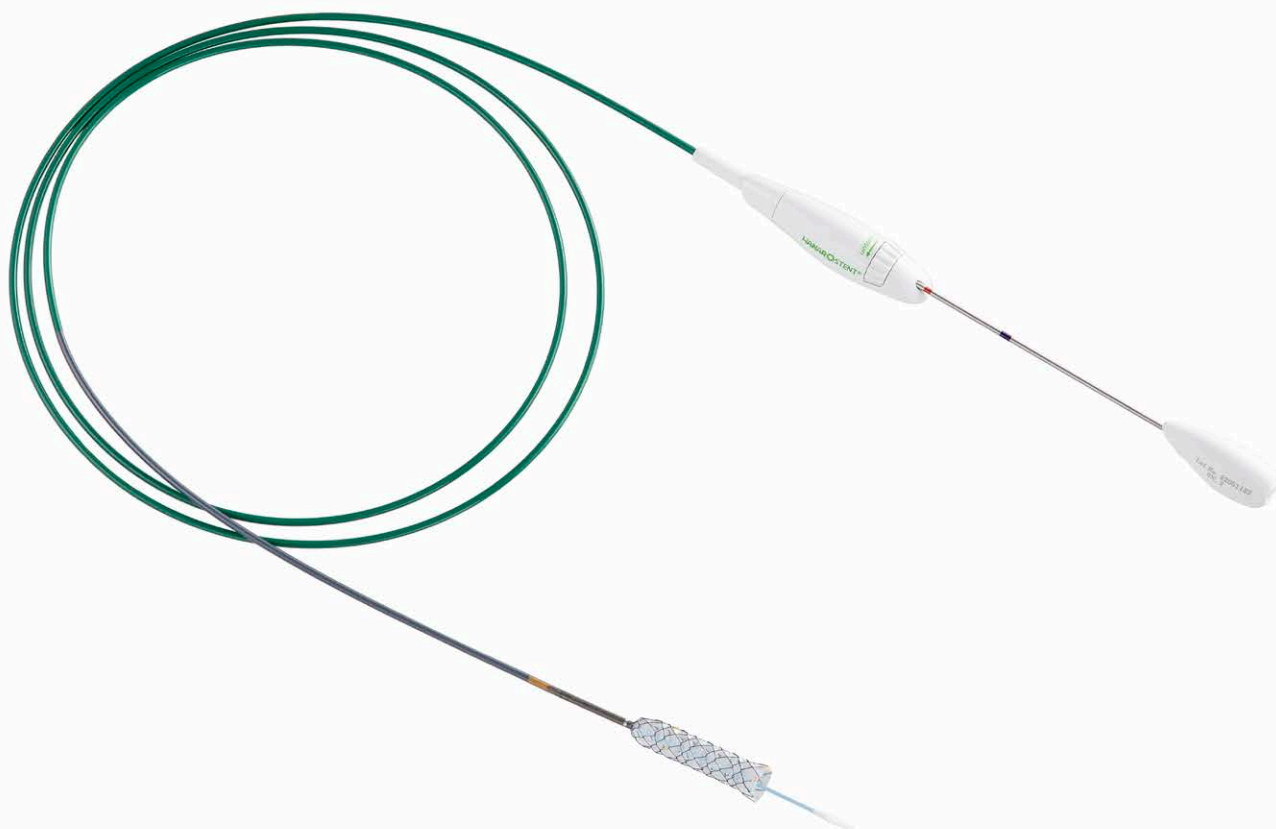

径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT 胆管用パーシタルカバー
医療機器承認番号：30300BZ100032000

外国特例承認取得者：M.I.Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1536902-AB