



MANTIS™ Closure Device

マンティス クロージャーデバイス

穿孔・粘膜/粘膜下層組織欠損部の
閉鎖を目的として開発された
Closure Device



「掴む」「寄せる」「閉じる」

3ステップ シンプルアプローチ


止血・閉鎖手技を効率的にサポート



掴む




寄せる

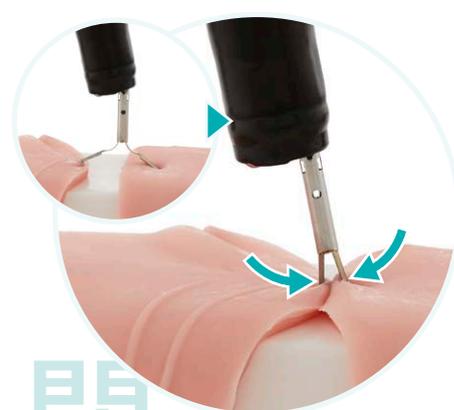

閉じる

.....

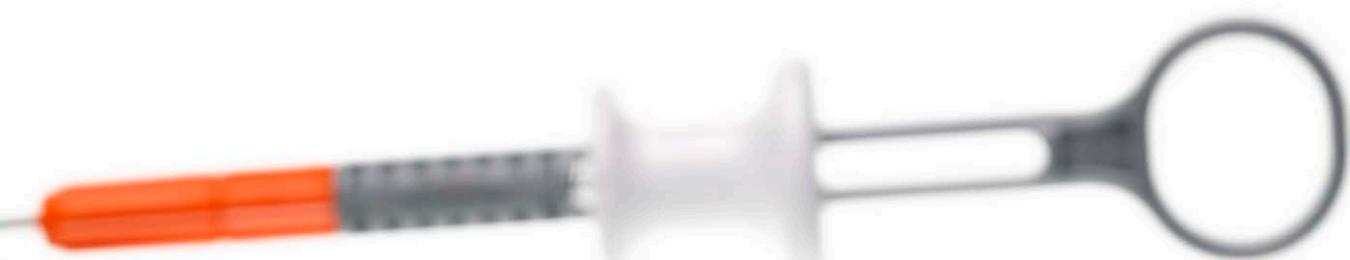


MANTISTM
Closure Device






▶ TruGrip™ anchor

組織把持性能の向上を意図した先端形状。
把持した組織が滑ることが
危惧される状況下でも
良好な組織把持性能が期待できます。
開口長にとられない閉鎖性能。

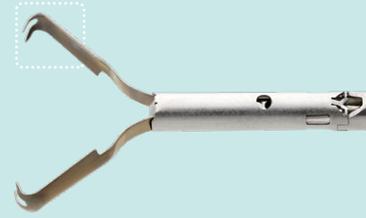

▶ 32本編み込みシース

従来の介助者による回転操作に加え、
術者による回転操作を可能にする
独自シース構造を採用。
術者による回転操作が微調整を
可能にし最適なポジションへの
アプローチをサポート。

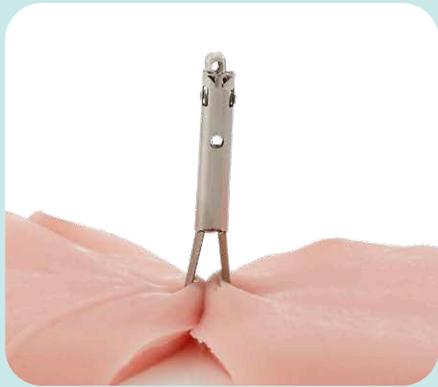

▶ 従来品より 厚みを増したジョー

従来品よりジョー部分の
厚みを増すことにより向上された剛性。
デバイスの変形を低減し、
閉鎖効率の向上が期待できます。



▶ 独自のLocking System

本体にLocking Systemを
内蔵することで
良好な閉鎖維持性能が期待できます。



MANTIS™ Closure Device

カタログ番号	製品名	有効長 (cm)	クリップ 開口長 (mm)	最小 適合鉗子口径 (mm)	販売個数
M00521420	マンティス クロージャーデバイス	235	11	2.8	1本入／1箱
M00521421					10本入／1箱

販売名: Mantis クリップ
医療機器承認番号: 30500BZX00015000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1629101-AB