


**EndoVive™ TTP Jejunal Feeding Tube**  
エンドビブ TTP Jチューブ

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

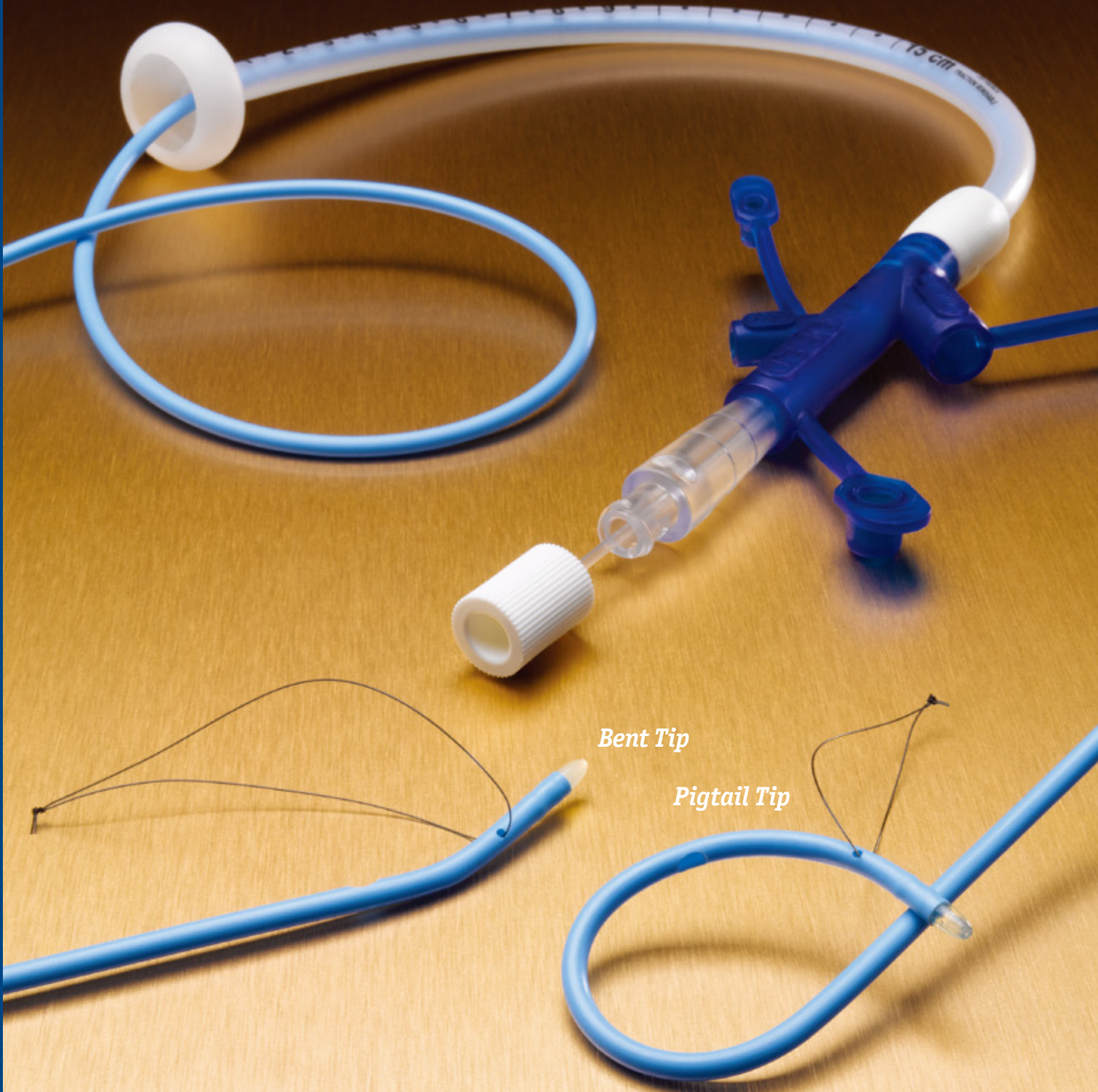

*Bent Tip*

*Pigtail Tip*

## Temp Tip™ 親水溶解性チップ

- ◆ 小腸へのスムーズな挿通を実現する親水性チップを採用。
- ◆ 挿入後最大24時間以内に体内で先端チップが溶解し、先端部の内腔を最大化するため、栄養剤が通りやすくなりチューブの閉塞を低減します。




## Flexima™ 素材

- ◆ 体温で柔らかくなるFlexima™ 素材は、挿入時には高いプッシュビリティを提供し、留置後は粘膜に負担をかけない柔軟性を発揮します。



## 挿入と留置に適したデザイン

- ◆ ベントチップとピッグテイルチップの2種類をご用意。小腸でのアンカリングに適しています。
- ◆ 挿入時のプッシュビリティを促進するスタイレットを採用しました。
- ◆ Over the Wireによる留置と、ループを把持して留置部位に誘導するテザー法の2つの手技に対応しています。

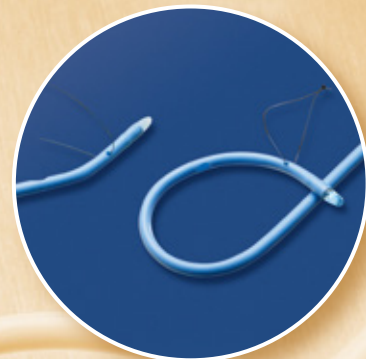

### エンドビブ TTP Jチューブ

カタログ番号	外径 (F)	先端形状	チューブ長さ (cm)	PEG適用サイズ (F)	販売単位
6632	8.5	ベントチップ	68	20	1セット / 袋入
6633	8.5	ピッグテイルチップ	68	20	1セット / 袋入
6634	12	ベントチップ	68	24	1セット / 袋入
6635	12	ピッグテイルチップ	68	24	1セット / 袋入

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：TTP Jチューブキット  
医療機器認証番号：225ABBZX00055000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。  
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston  
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス  
[www.bostonscientific.jp](http://www.bostonscientific.jp)

1903-31947-C-ODP / PSST20190311-0245