


HANAROSTENT® Naturfit™ Duo Cover

ハナロステント ナチュラルフィット胃・十二指腸用カバー

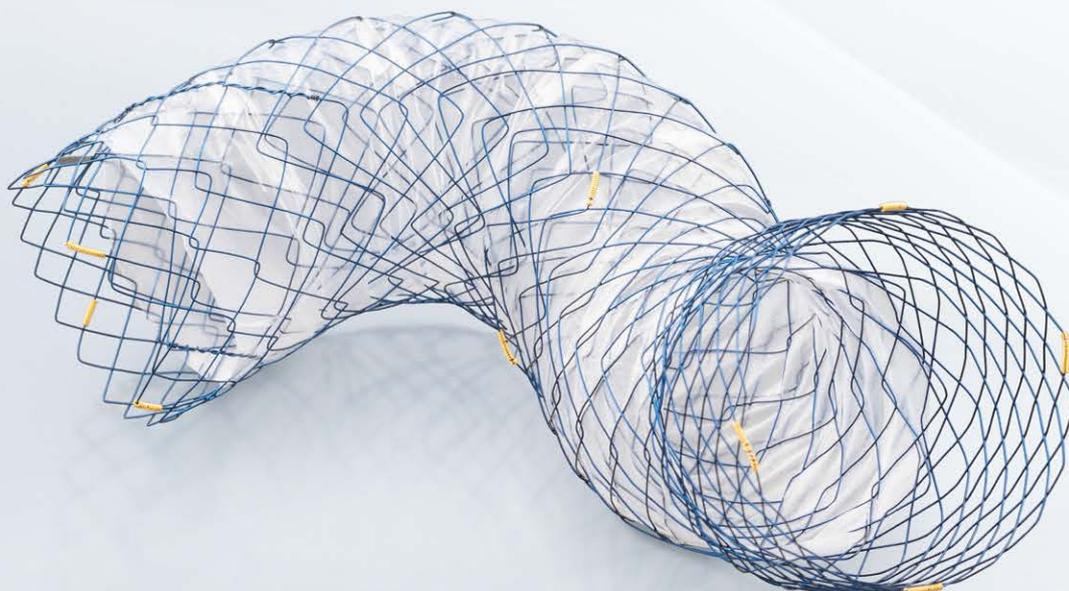


HANAROSTENT® Naturfit™ Duo Cover

ハナロステント ナチュラルフィット胃・十二指腸用カバー


▶ スtent内腔へのイングロースを防ぐシリコンカバー

イングロースによる再狭窄の抑制を目指して伸縮性のあるシリコンカバーを装着しました

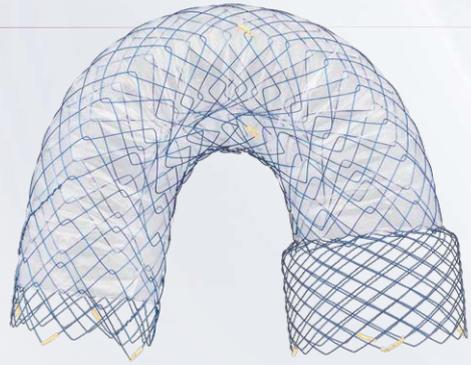


▶ Low Axial Forceを目指したダブルレイヤー構造

シリコンカバーはダブルレイヤー構造（ステントワイヤに挟まる形で固定）を採用しています。ダブルレイヤー構造によりアキシャルフォースの増加を減らしています

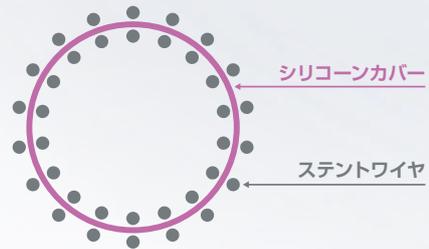


▶ スtent再収納機能

ステントは展開途中での再収納に対応しており、留置位置の修正をおこなうことが可能です。

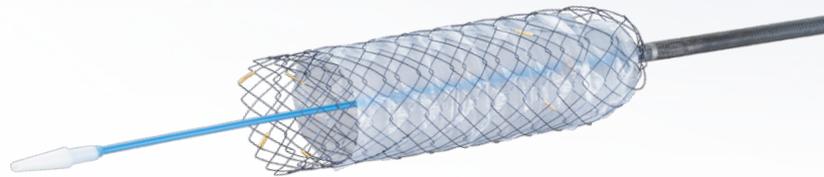

▶ マイグレーション抑制を目的としたフレア&ベア

マイグレーション抑制を目指し、Proximal側に15mmのフレア部とDistal側にベア部を配置しています

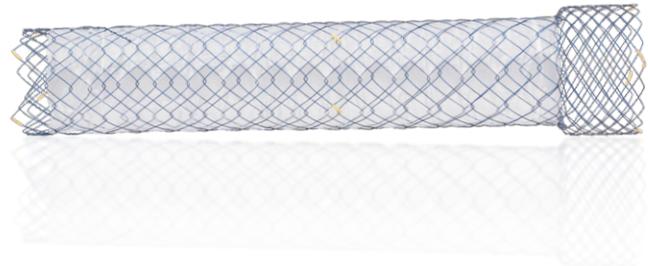

ハナロステント ナチュラルフィット胃・十二指腸用カバー

カタログ番号	ステント				デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径 (mm) フレア部	外径 (mm) 本体	ステント長 (cm)	カバー長 (cm)	外径 (Fr)	有効長 (cm)	
M00504740	27	22	6	4	10.2	230	0.035
M00504760	27	22	8	6	10.2	230	0.035
M00504780	27	22	10	8	10.2	230	0.035
M00504800	27	22	12	10	10.2	230	0.035

販売単位 1本 / 箱入

径表示換算目安: 1mm=3French=0.0394inches

販売名: HANAROSTENT Naturfit 胃・十二指腸用カバー
医療機器承認番号: 30400BZ100011000

外国特許承認取得者: M.I.Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者: ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1468801-AB