


HANAROSTENT® Naturfit™ Duo

ハナロステント ナチュラルフィット胃・十二指腸用

高い柔軟性と十分な拡張力
&
視認性と再収納機能

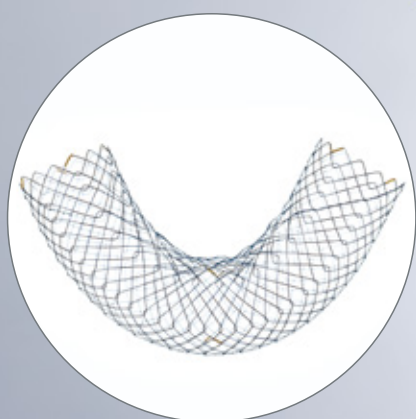

どこまでも柔らかく、どこまでもやさしく
高い柔軟性*を持った胃・十二指腸用ステントを
細径9Fデリバリーで

*弊社自社製品比較

HANAROSTENT® Naturfit™ Duo

ハナロステント ナチュラルフィット胃・十二指腸用

日本の先生方と患者様のために作られた
日本市場専用の胃・十二指腸ステント
HANAROSTENT® Naturfit™ Duo
ゼロ・アキシャルフォースを目指した
ボストン・サイエンティフィック ジャパンの技術の集大成です

柔軟性

1周12セルのクロス構造は、アキシャルフォースが低く、
屈曲した部位にもなめらかに追従します。
また、ステント断端部で粘膜を適度に圧迫しないことで、
粘膜損傷のリスク低減が期待できます。

拡張力

0.18mmのナイチノールワイヤを採用したステントデザインは
高い柔軟性を保ちながら、求められる拡張力も提供します。

視認性&再収納機能

ステント展開中に再収納することにより留置位置の調整が可能です。
また、12箇所の透視下ゴールドマーカと内視鏡イエローマーカで、
最適な長さのステントの意図した場所への留置が期待できます。

ハナロステント ナチュラルフィット胃・十二指腸用

カタログ番号	ステント		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)	販売単位
	外径(mm)	ステント長(cm)	外径(F)	有効長(cm)		
M00525680	22	6	9	230	MAX. 0.035	1本/箱
M00525690	22	8	9	230	MAX. 0.035	
M00525700	22	10	9	230	MAX. 0.035	
M00525710	22	12	9	230	MAX. 0.035	

径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT Naturfit 十二指腸用
医療機器承認番号：23000BZ100039000

外国特例承認取得者：M.I. Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2103-31520-B-3 / PSST20210316-0291