


HANAROSTENT® Naturfit™ Colon Cover

ハナロステント ナチュラルフィット大腸用カバー

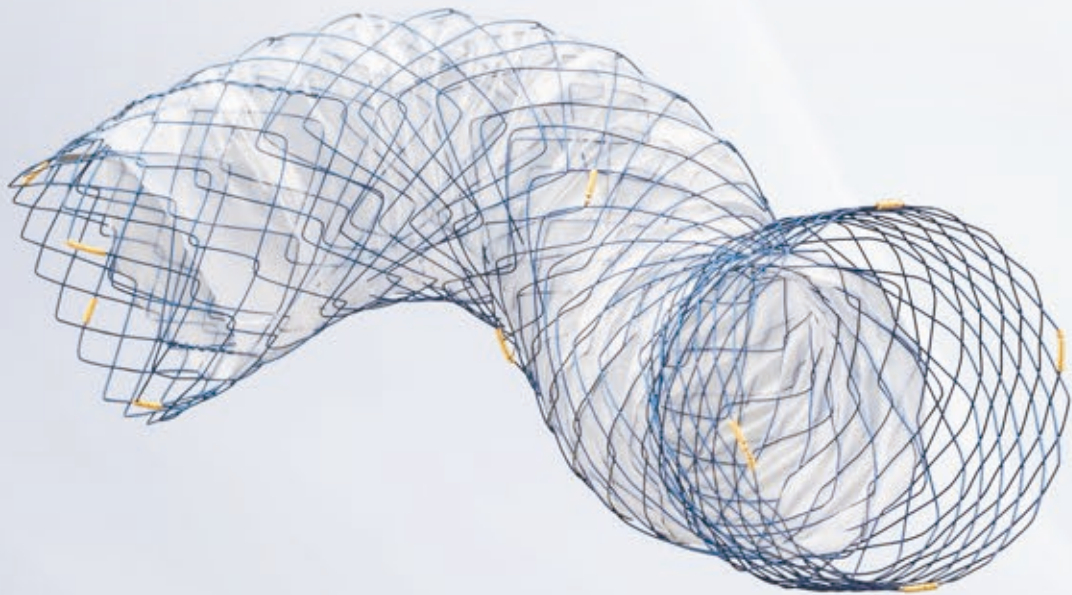


HANAROSTENT® Naturfit™ Colon Cover

ハナロステント ナチュラルフィット大腸用カバー


ステント内腔へのイングロースを防ぐ シリコンカバー

大腸ステント治療の主要な有害事象であるイングロースに伴う再狭窄を防止するために、伸縮性があるシリコンカバーを装備しました

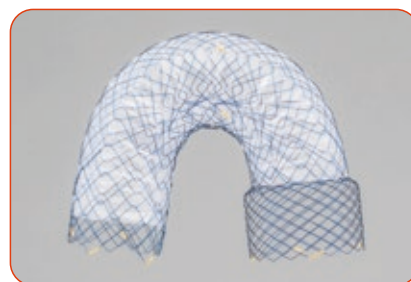


Low Axial Forceのための ダブルレイヤー構造

シリコンカバーは特別に設計されたダブルレイヤー構造にはさまれる事で固定されています。ステントワイヤーとカバーが接着されることによる、アキシャルフォース増加を防ぎます

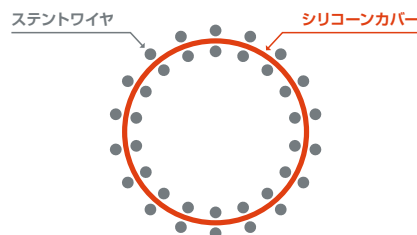


ステント再収納機能

ステント留置位置の調整が必要な場合、リリース途中のステントを再収納して、再度留置しなおす事ができます

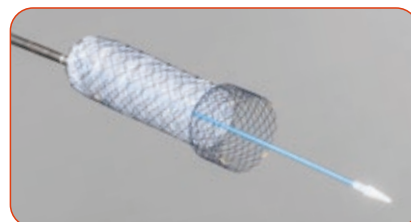

マイグレーション抑制を目的とした口側フレア

長さ15mmの口側フレアはステントボディ部分+5mmの直径があり、引き抜き抵抗値が高いため、マイグレーション抑制効果が期待できます

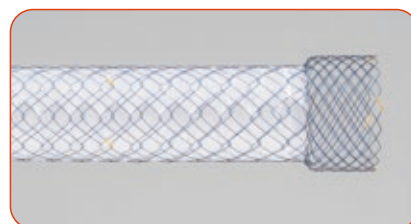

ハナロステント ナチュラルフィット大腸用カバー

カタログ番号	ステント			カテーテル		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径 (mm)	ステント長 (mm)	カバー長 (mm)	外径 (F)	有効長 (cm)	
M00526200	18	60	40	10.2	230	MAX. 0.035
M00526210	18	90	70	10.2	230	MAX. 0.035
M00526220	18	120	100	10.2	230	MAX. 0.035
M00526260	22	60	40	10.2	230	MAX. 0.035
M00526270	22	90	70	10.2	230	MAX. 0.035
M00526280	22	120	100	10.2	230	MAX. 0.035

販売単位 1本/箱入

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT Naturfit 大腸用カバー
医療機器承認番号：30400BZ100002000

外国特許承認取得者：M.I.Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2022 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1297303-AA