

RX Needleknife XL™

RX ニードルナイフ XL




**A difference
you can feel.™**



RX Needleknife XL™

RX ニードルナイフ XL

安全で確実な胆管挿管をサポートする 調節可能なカッピングワイヤを備えたニードルナイフです

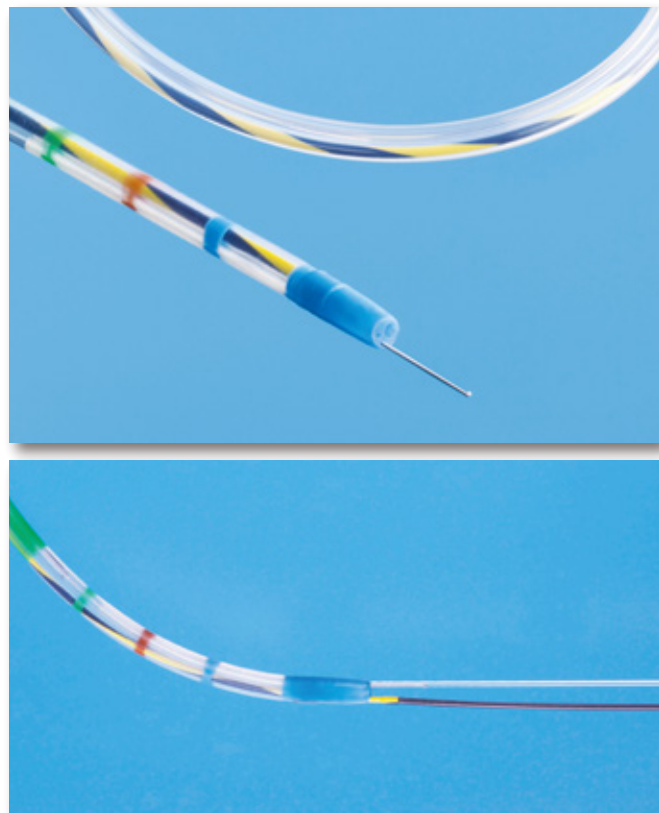

コントロール可能なカッピングワイヤ

カッピングワイヤは長さを調節できるため、
繊細なコントロールが可能です。

柔軟性とコシを両立させたカテーテル

カテーテルは先端から9cmが5.5Fr、手元部は7Frの
テーバ加工を施し、柔軟性とコシを両立させました。

先端プレカーブ加工


カテーテル先端部はプレカーブを施し、
乳頭へのアプローチ性を高めました。

RX Biliary System™ 対応

術者自身がカテーテルを操作できるSingle Operation
と迅速なデバイスエクステンジを可能にし、手技時間と
被曝時間の短縮を実現します。

RX ニードルナイフ XL™

カタログ番号	カッピングワイヤ長 (mm)	先端部外径 (Fr)	カテーテル シャフト部外径 (Fr)	有効長 (cm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inch)
4584	5	5.5	7	200	2.8	0.035

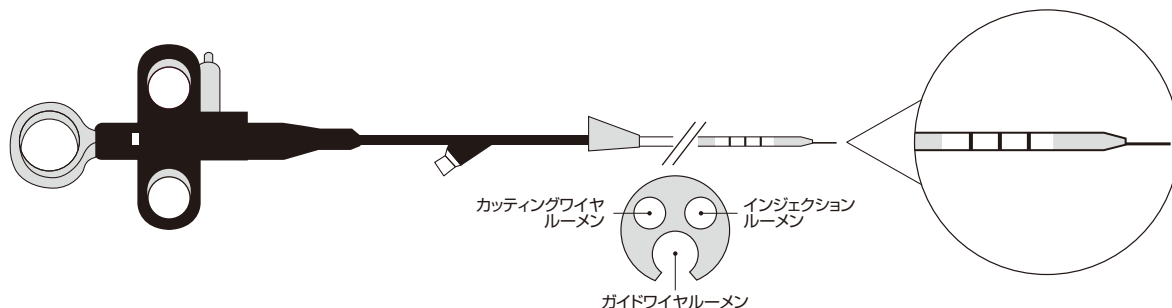

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：RX ニードルナイフ XL
医療機器認証番号：224ABBZX00046000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2006-31212-B-ODP / PSST20200312-0226