


# StoneHunter

ストーンハンター 胆管結石用採石バスケット



ストーンハンター  
ワイヤガイドタイプ

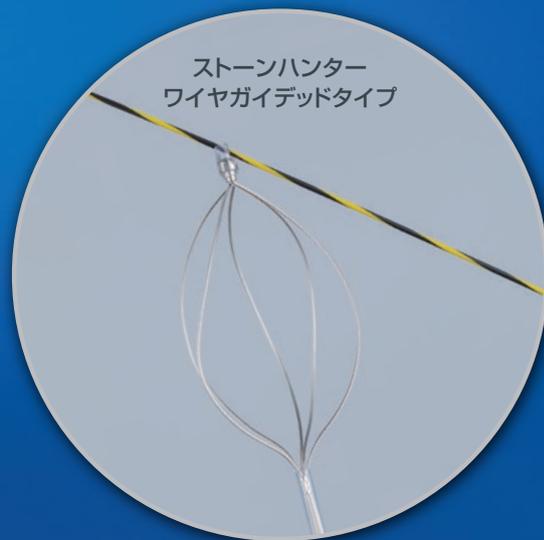

# StoneHunter

ストーンハンター 胆管結石用採石バスケット

## 結石把持能力


- ▶ このバスケットの為に開発された超高純度ステンレス素材により剛性の強いワイヤを実現し、狭いスペースでも開きの良さを実現。
- ▶ ティアドロップ形状により通常の採石方法はもちろんの事、下部胆管の膨らみに対してもバスケットがフィットするよう設計されています。

## X線下での視認性

- ▶ 超高純度ステンレスワイヤの為、従来のナイチノール系ワイヤよりもX線下での視認性が高く、結石把持の確認が容易に行えます。



ストーンハンター  
ノンワイヤガイドタイプ

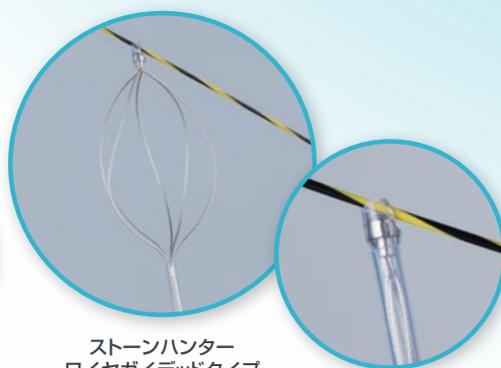

ストーンハンター  
ワイヤガイドタイプ

| 製品名                     | カタログ番号    | バスケット径<br>(cm) | 適合ガイドワイヤ径<br>(inch) | 有効長<br>(mm) | 適合鉗子口径<br>(mm) |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|----------------|
| ストーンハンター<br>ノンワイヤガイドタイプ | M00567260 | 2.2            | —                   | 1980        | ≥3.2           |
| ストーンハンター<br>ワイヤガイドタイプ   | M00567280 | 2.2            | 0.035               | 1980        | ≥3.7           |

販売名：ストーンハンター  
医療機器認証番号：230ABBZX00083000  
製造販売業者：レイク R&D 株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。  
© 2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston  
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス  
[www.bostonscientific.jp](http://www.bostonscientific.jp)

1806-31607-A-ODP / PSST20181205-1151