

Ultraflex™ Esophageal Stent

ウルトラフレックス 食道用ステント



カバードタイプとノン・カバードタイプのステントに、それぞれ2つのリリースシステムを採用。留置部位に最適なリリースシステムを選択できます。

柔軟性が高く、食道の蠕動運動に十分に適応するUltraflex™シリーズ。

カバードタイプは悪性腫瘍の侵食を防ぐだけでなく、食道フィステルを伴う悪性食道狭窄開存に適応しています。



2タイプのリリースシステム

ステントを留置する部位によって、遠位側から展開するディスタルリリースシステムと近位側から展開するプロキシマルリリースシステムのいずれかを選択できます。

2つのリリースシステムには、それぞれカバード、ノンカバードがあります。



Ultraflex™ Esophageal Stent

ウルトラフレックス 食道用ステント

■フレア構造

ステント留置後の位置ずれや脱落を防ぐため、ステント近位側をフレア構造に設計してあります。

■高強度スーチャーによる ハイテンシャルリリース機構

ステント留置位置の微調整を可能にする、ハイテンシャルリリース機構(HTR)を採用しています。

■ロープロファイル先端チップ


デリバリーカテーテルの先端は5.5mmのロープロファイルチップなので、狭窄部をスムーズに通過できます。

■エックス線不透過性マーカ

ステントが展開した際に、ステント両端位置の確認が容易にできるエックス線不透過性マーカがついています。(カバータイプはカバー位置用の内側マーカは太く、ステント位置用の外側マーカは細くなっています。)



フレア構造

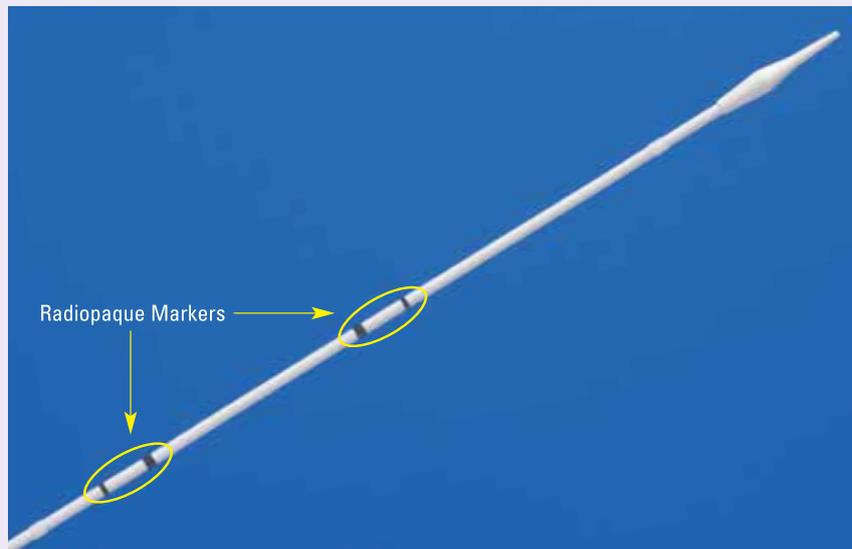

■ニットループ デザイン

ステントは形状記憶合金(ニチチノール)1本を編み込んだ構造により、高い柔軟性で食道の蠕動運動に対応します。



Ultraflex™ Esophageal Stent

ウルトラフレックス 食道用ステント

ウルトラフレックス食道用 カバードステント

販売名：ウルトラフレックス食道用カバードステント
医療機器承認番号：20800BZY00525000

カタログ番号	ステント				適合ガイドワイヤ (inch)
	ノンカバー部 外径(mm)	フレア部 外径(mm)	カバー長 (cm)	ステント長 (cm)	
ディスタルリリース					
1373	18	23	7	10	0.038
1375	18	23	12	15	0.038
プロキシマルリリース					
1384	18	23	7	10	0.038
1386	18	23	12	15	0.038

ウルトラフレックス食道用 ステント

販売名：ウルトラフレックス食道用ステント
医療機器承認番号：20700BZY00158000

カタログ番号	ステント			適合ガイドワイヤ (inch)
	外径 (mm)	フレア部 外径(mm)	ステント長 (cm)	
ディスタルリリース				
1371	18	23	10	0.038
1372	18	23	15	0.038
プロキシマルリリース				
1380	18	23	7	0.038
1381	18	23	10	0.038
1383	18	23	15	0.038

ウルトラフレックス食道用 大口径カバードステント

販売名：ウルトラフレックス食道用大口径カバードステント
医療機器承認番号：20800BZY00525000

カタログ番号	ステント				適合ガイドワイヤ (inch)
	ノンカバー部 外径(mm)	フレア部 外径(mm)	カバー長 (cm)	ステント長 (cm)	
ディスタルリリース					
1420	23	28	7	10	0.038
1421	23	28	9	12	0.038
プロキシマルリリース					
1424	23	28	7	10	0.038
1425	23	28	9	12	0.038

CRE™ プロ GI ワイヤガイドッドバルーンダイレータ (食道用、幽門用)

販売名：CRE WG 上部用
医療機器承認番号：221ABBZX00243000

カタログ番号	バルーン 拡張径 (mm)	バルーン 有効長 (cm)	圧力 (atm)	カテーテル 有効長 (cm)	カテーテル 外径 (Fr)	適合鉗子口径 (mm)
5874	6 / 7 / 8	5.5	3 / 6 / 10	180	7.5	2.8
5875	8 / 9 / 10	5.5	3 / 5.5 / 9	180	7.5	2.8
5876	10 / 11 / 12	5.5	3 / 5 / 8	180	7.5	2.8
5877	12 / 13.5 / 15	5.5	3 / 4.5 / 8	180	7.5	2.8
5878	15 / 16.5 / 18	5.5	3 / 4.5 / 7	180	7.5	2.8
5879	18 / 19 / 20	5.5	3 / 4.5 / 6	180	7.5	2.8

CRE™ フィックスドワイヤ バルーンダイレータ (食道用)

販売名：CRE 上部消化管拡張バルーンカテーテル
製造販売届出番号：13B1X00043000006

カタログ番号	バルーン 拡張径 (mm)	バルーン 有効長 (cm)	圧力 (atm)	カテーテル 有効長 (cm)	カテーテル 外径 (Fr)	適合鉗子口径 (mm)
5833	6 / 7 / 8	8	3 / 6 / 10	180	6	2.8
5834	8 / 9 / 10	8	3 / 5.5 / 9	180	6	2.8
5835	10 / 11 / 12	8	3 / 5 / 8	180	6	2.8
5836	12 / 13.5 / 15	8	3 / 4.5 / 8	180	6	2.8
5837	15 / 16.5 / 18	8	3 / 4.5 / 7	180	6	2.8
5838	18 / 19 / 20	8	3 / 4.5 / 6	180	6	2.8

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

※圧力表示換算目安：1atm=101.325kPa

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

31406-B / PSST20170523-0494