


HANAROSTENT® Biliary Partial Cover **Benefit**




広がる選択肢

パーシャルカバースtent 6mm径・8mm径
5.9F デリバリーシステムの Benefitシリーズ

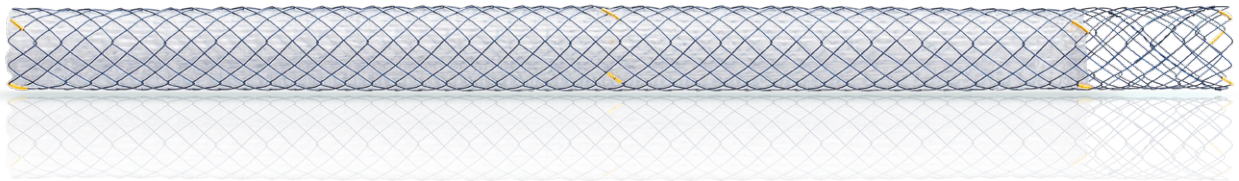

HANAROSTENT® Biliary Partial Cover Benefit

15mmのアンカバー部により、肝門部領域への留置にも選択できる
パーシャルカバーブレイデッドステント
手技進行をサポートする再収納可能な
5.9Fデリバリーシステム

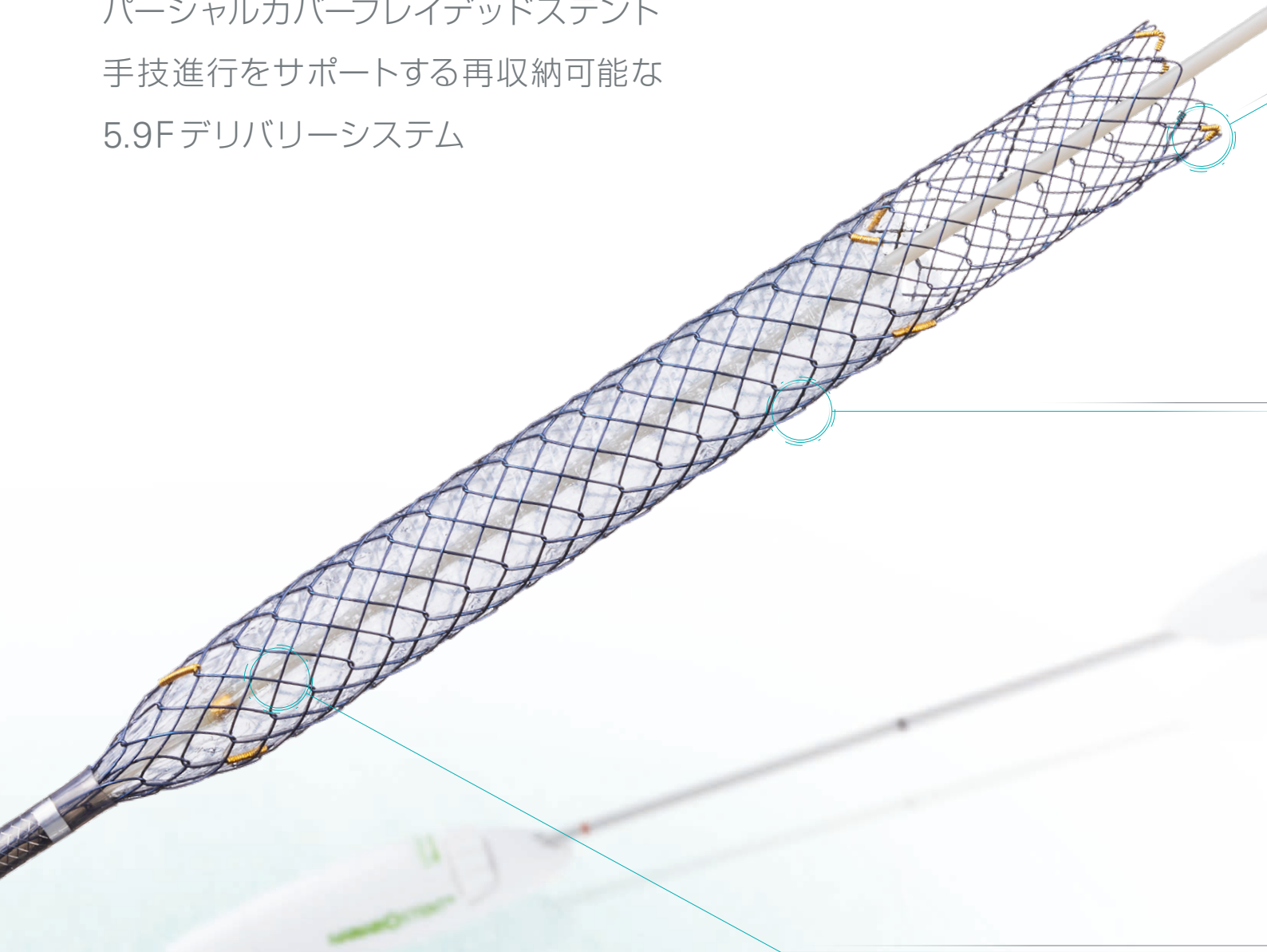


ボストン・サイエンティフィック ジャパン(株)は、2016年からHANAROSTENTの販売を開始しました。
胆管ステント留置術の歴史を日本の先生方とともに歩んできた
ボストン・サイエンティフィック ジャパン(株)が、具現化した新製品。
ボストン・サイエンティフィック品質のHANAROSTENTをご提案します。



4箇所（12個）の不透過マーカによる視認性を確保

- ▶ ステントの遠位部、中部、近位部に加え、カバー部アンカバー部の境界にゴールドマーカを配置、狙った場所への留置をサポートします。

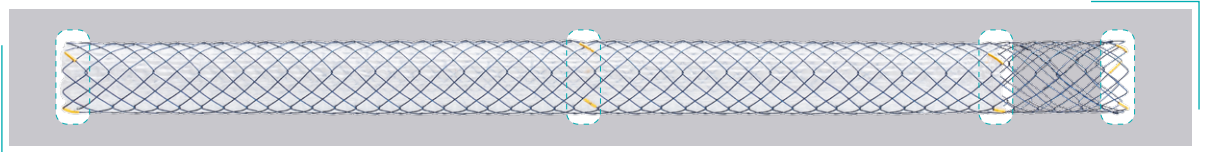



幅広い手技に対応するステントラインナップ

- ▶ 6mmと8mm径、長さは、6/8/10/12cmをラインナップし肝門部領域をはじめとする、シビアな位置合わせや複数留置が求められる局面での位置合わせをサポートします。
- ▶ セルサイズの最適化により、拡張力の確保を目指しました。




5.9F デリバリーシステム

- ▶ 従来型5.9F デリバリーシステムのインナーシーパーツを溶接型から一体型に変更、オリーブチップ素材も変更し、手技進行のサポートを目指しました。

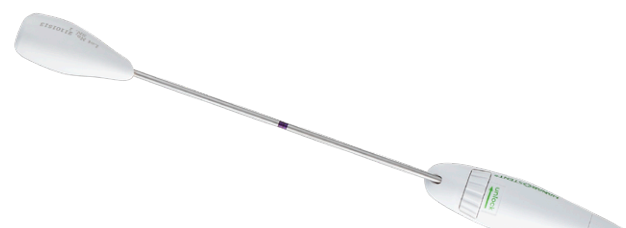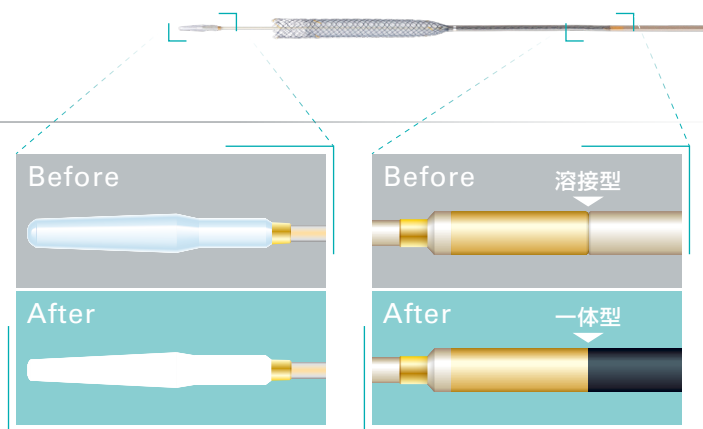

HANAROSTENT® Biliary Partial Cover Benefit

カタログ番号	ステント		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径(mm)	ステント長(mm)	外径(F)	有効長(cm)	
M00505240	6	60	5.9	180	MAX 0.025
M00505250	6	80	5.9	180	MAX 0.025
M00505260	6	100	5.9	180	MAX 0.025
M00505270	6	120	5.9	180	MAX 0.025
M00505280	8	60	5.9	180	MAX 0.025
M00505290	8	80	5.9	180	MAX 0.025
M00505300	8	100	5.9	180	MAX 0.025
M00505310	8	120	5.9	180	MAX 0.025

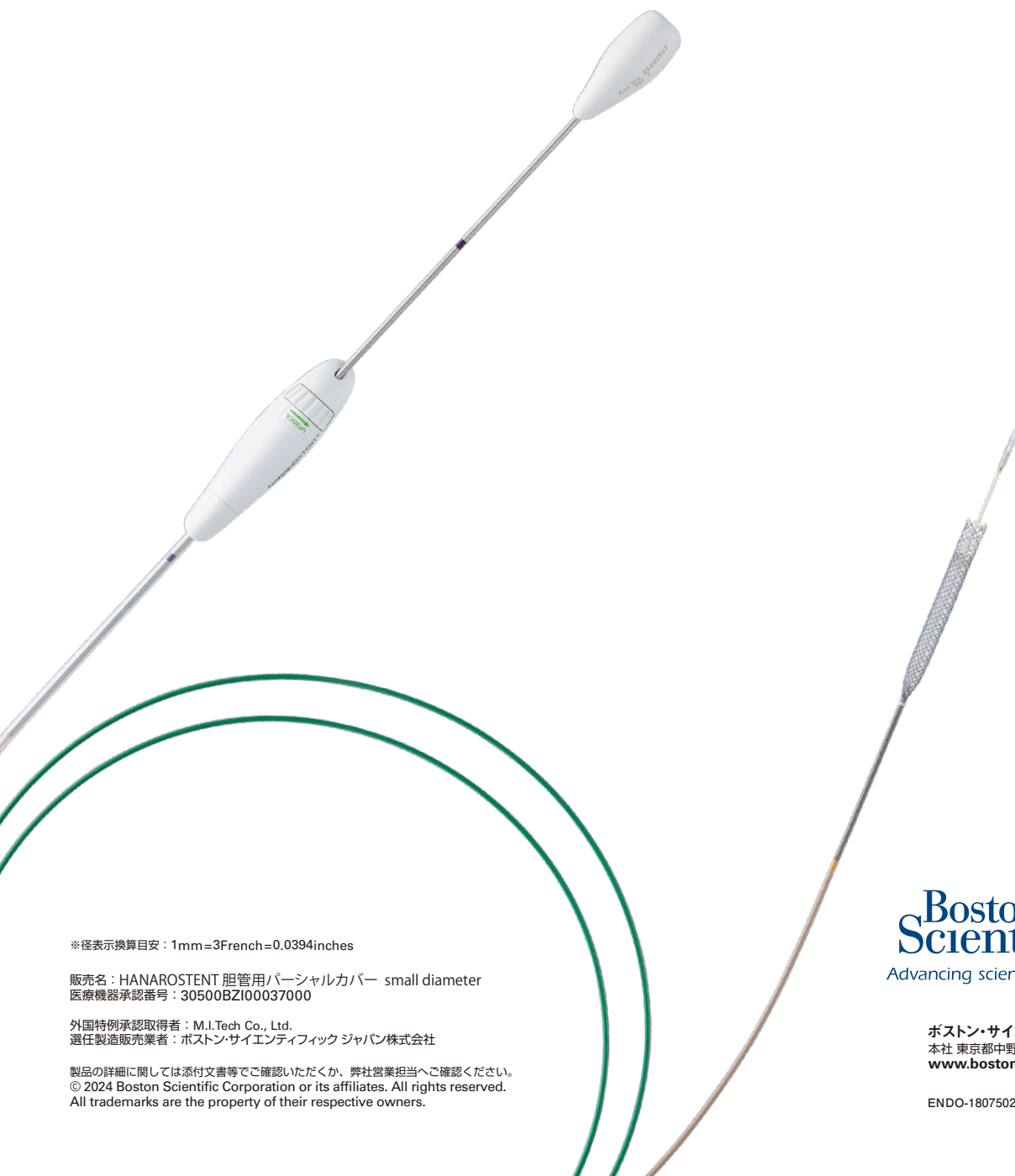

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT 胆管用パーシャルカバー small diameter
医療機器承認番号：30500BZI00037000

外国特例承認取得者：M.I.Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2024 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1807502-AA