



# CRE RX 胆道拡張バルーンカテーテル

## CRE RX biliary Dilatation Balloon

### 3段階低圧拡張 CRE バルーン

- 胆道に適した 8-10 mm, 10-12 mm, 12-15 mmの拡張径をそれぞれ 1 本のバルーンで対応できます
- 8 mm拡張圧は 3 atm (8-10 mmバルーン使用時)。既存 EPBD8 mmバルーン\* (拡張圧 11atm) の約 30%で低圧拡張できます




### 有効長 3cm のショートバルーン

- ショルダーを押さえた従型バルーンの有効長を 3 cm にすることで、拡張操作時の安定したスコープポジショニングをサポートします
- 乳頭直上の結石症例でもバルーンが干渉する事無く乳頭拡張ができます
- ロングバルーン\*\*と比較して素早くデフレーション・インフレーションが可能



### 術者をサポートする RX Biliary System 対応

- スピーディーなバルーンの挿入/抜去を可能にするラピッドエクスチェンジタイプのカテーテルを採用
- RX ロッキングシステム\*\*\*の併用で、術者によるガイドワイヤ固定ができます

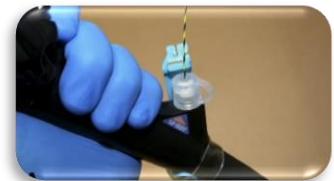

#### ■ CRE™RX 胆道拡張バルーンカテーテル

販売名: CRE RX 胆道拡張バルーンカテーテル  
医療機器認証番号: 230ABBZX00084000

カタログ 番号	バルーン		圧力 (atm)	カテーテル		最小適合 鉗子口径 (mm)	希望販売価格
	拡張径 (mm)	有効長 (cm)		外径 (F)	有効長 (cm)		
M00558920	8 / 9 / 10	3	3 / 5.5 / 9	7.5	180	3.7	¥63,900
M00558930	10 / 11 / 12	3	3 / 5 / 8	7.5	180	3.7	¥63,900
M00558940	12 / 13.5 / 15	3	3 / 4.5 / 8	7.5	180	3.7	¥63,900

1mm=3F

販売単位 1本 / 袋入

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。  
©2024 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
PSST-ENDO-1849108AA

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
本社 東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス  
www.bostonscientific.jp

\*販売名: RX ハリケーン デフラクション バルーン 医療機器認証番号 220ABBZX00070000

\*\*販売名: CRE 胆道拡張バルーンカテーテル 医療機器認証番号 224ABBZX00068000

\*\*\*販売名: RX ロッキングデバイス 製造販売届出番号 13B1X00043000029